

産婦人科検診台

# DG-325

高コストパフォーマンスを実現した、  
電動油圧式産婦人科検診台。  
広い診療域が確保でき、  
処置等に適しています。



踵受けはオプションです。  
写真はDG-325 ES19(ベビーピンク)です。

## こだわりの抗菌・ 耐アルコールレザーを採用



### 抗菌性

JIS Z 2801:2010「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



### 耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。  
※当社基準に基づく

## Color Variation



ES19(ベビーピンク)



ES9(アイボリー)



ES29(ブルー)



## “美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、  
リラックスしてほしい、もちろん健康になってほしい、  
そしてなによりその尊厳が守られてほしい。  
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、  
わたしたちタカラベルモント、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア  
プロジェクトの  
詳細はこちらから



<https://whc-takara.jp/>

## Feature

### ワイヤレスフットスイッチで足元スッキリ!

赤外線が360°送信され、操作時の配置や向きが自由度がアップ。



■ 本体補助スイッチ  
本体に「P:プリセット」「R:リターン」操作スイッチを装備。本体からの操作も可能です。



### ワイドにカバーするスライド式汚水トレイ



ゆったりした座り心地の背もたれ & シートで安楽な姿勢を確保

スムーズな診察をサポートする

プリセット・オートリターン機能 搭載

振動やショックの少ない電動油圧機構を採用

最高位 995mm  
最低位 495mm

股受け、サイドレール、サイドフェンスはオプションです。

## Option

### ■ 股受け (1組) DG-325-C



※股受け、踵受けにはバンドが付属します。

### ■ 踵受け (1組) DG-325-B




### ■ 上肢台 DG-325-A



※上肢台、サイドフェンスの取付には、サイドレール (DG-325-A-SR、2本1組) が別途必要です。

### ■ サイドフェンス DG-325-SFS

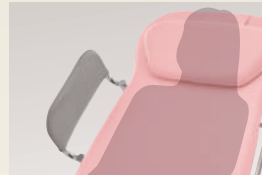

### ■ 足板 DG-325-H



### ■ カーテン架 UR-325-CBK



### ■ シートヒーター DG-325-E



※ヒーター部はイメージです。

### ■ 鉗子立て (2個)



### ■ クスコ掛け





### ■ ロールシート (12本入り)

- 汚水タンク  
小型 (容量5ℓ) / 大型 (容量10ℓ)
- 排水トラップ
- ビニールシートカバー

## Specifications

寸法図 [単位: mm]

DG-325

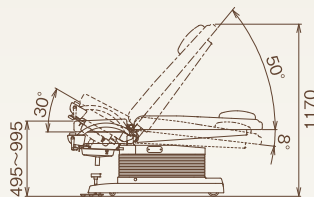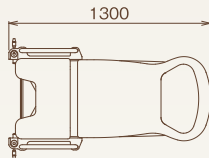

### 仕様

製品コード	DG-325
本体昇降範囲	495mm~995mm
背もたれ昇降角度	-8°~50°
シート昇降角度	0°~30°
プリセット/オートリターン動作	○

電気定格	AC100V 470/540VA 50/60Hz
質量	135kg
製造販売届出番号	27B1X00042000086
販売名	産婦人科検診台 DG-325

作動(運転)モード 非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル 1:5

※デューティサイクル:油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率(ただし、環境温度により異なります。)

標準付属品 ・枕1個 ・フットスイッチ1個 ・排水ホース(バンド付)1式 ・汚水トレイ(金網付)1式

**タカラベルモント株式会社**

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620 <https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

営業所

札幌 (011)863-2139  
名古屋 (052)931-5163  
福岡 (092)474-7306

仙台/盛岡 (022)231-3458  
金沢 (076)221-8412  
鹿児島 (099)226-9481

さいたま (048)640-5803  
大阪 (06)6211-5947

新潟 (025)333-8405  
岡山 (086)233-8826

東京 (03)3401-9795  
広島/高松 (082)277-6700



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。 ●このカタログは2023年5月現在のものです。

50B23050050P  
YY-ME245