

やさしく、迎える。
やわらかく、包み込む。

sucura

耳鼻科椅子 スクーラ



sucura

耳鼻科椅子スクーラ



患者さんを
ゆったりと支える、
確かな治療。

[sure] [cure]

患者さんがもっとリラックスして治療を受ける。もっと安心して過ごす。

そんな医療が実現できるのも、信頼のある確かな(sure)治療(cure)があってこそ。


耳鼻科椅子スクーラは、患者さんにやさしいあったかな治療空間をつくり出します。

Feature 01 (ヘッドレスト/2type)

ヘッドレストのポジショニングをよりの確に。
電動式と手動式の2タイプのヘッドレスト。

□電動式ヘッドレストtype

電動でヘッドレストの伸縮動作と前屈動作ができます。操作スイッチは背モタレの左肩側にあるのでドクターからのアプローチも容易に行えます。

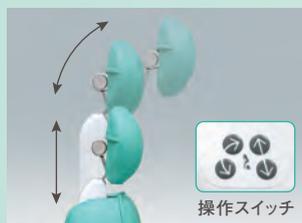

電動式ヘッドレスト

□手動式ヘッドレストtype

レバー操作によりヘッドレストを任意のポジションに簡単に固定できます。仰臥位でのヘッドダウンも可能です。



手動式ヘッドレスト

Feature 02 (アームレスト/2type)

患者さんにリラックスを、スタッフ
2タイプのアームレスト。

□標準type

ふっくらとした楕円の形状が患者さんに安心感を提供します。



標準type

[2タイプ共通特長]

アームレストを後方に回転させることにより、患者さんへのアプローチやストレッチャーからの移載がスムーズに行えます(患者さんの右手側)。



DR-SCRAB (E55)

Feature 03

フに効率性を提供する、

よりスムーズな、より安全な機能を採用。
それぞれの患者さんに合わせたポジショニングができます。

□カットtype

カットtypeのアームレストは、患者さんの診療ポジションの変換が容易に行えます。



カットtype

□ポジション設定機能

フットスイッチに搭載したメモリー機能により、3ポジションのメモリー設定が可能。チェア後ろ側には、本体上下・背モタレ寝起・回転ロック操作ができるアシスタント用のジョイスティックも装備されています。



ジョイスティック

□セーフティー機能

オート動作時には、どのスイッチを操作しても動作が停止できるオールマイティーキャンセル方式を採用。ステップと床の間で足などを挟んだ時に停止する椅子下降停止装置も内蔵しています。



フットスイッチ

※写真はアームレスト標準type

※電動式ヘッドレスト用フットスイッチもオプションでご用意しております。

【Color Variation】



Lemon Yellow (ES2)



Mint Blue (ES5)



Ocean Blue (ES7)



Ivory (ES9)



Light Brown (ES10)

●仕様表


製品コード	DR-SCRDB (電動式ヘッドレスト/アームレスト標準) DR-SCRD2B (電動式ヘッドレスト/アームレストカット) DR-SCRAB (手動式ヘッドレスト/アームレスト標準) DR-SCRA2B (手動式ヘッドレスト/アームレストカット)
販売名	耳鼻科椅子 スクーラ
本体昇降機構	510~775mm (電動油圧式)
背モタレ寝起機構	5°~90° (電動油圧式)
本体回転機構	280° (マニュアル式)
本体回転ロック機構	電動油圧式

ヘッドレスト	電動式	電動油圧式
	手動式	マニュアル式
電気定格	100V 50/60Hz 4.3/5.2A	
質量	電動式*	172kg
	手動式*	170kg

*ヘッドレストの仕様です。

製造販売届出番号：27B1X00042001026

●寸法図 [DR-SCRDB (電動式ヘッドレスト/アームレスト標準)]

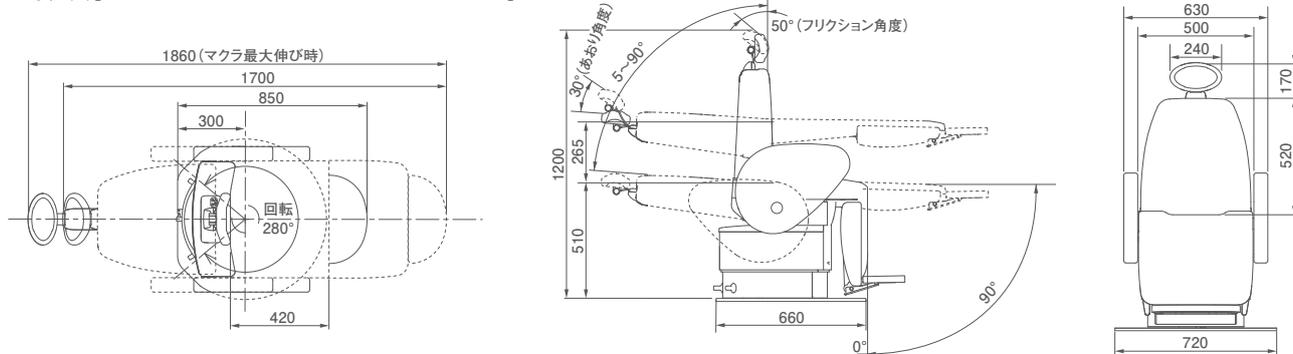

EX-CS2

一般診察対応

天板サイズ：幅600×長さ1900mm
天板カラー：ES15 ライトグリーン
※枕は別売品です。

販売名：診察台 EX-CS2
製造販売届出番号：27B1X00042000069



CO₂ レーザー PLUS Bel Laser +

ベルレーザー プラス

柔軟な取り回しを可能にする
フレキシブルファイバーを採用。

販売名：ベルレーザー
医療機器承認番号：21700BZZ00348000



タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
東京 (03)3401-9795	広島/高松 (082)277-6700
静岡 (054)237-8822	福岡 (092)474-7306
名古屋 (052)931-5163	鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
福岡 福岡市博多区博多駅南2-7-38	TEL.(092)474-7306
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://www.takabelmont.co.jp>



- ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認、ご相談ください。
- ご使用前に、添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、このカタログの仕様・デザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
- 写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
- このカタログは2020年7月現在のものです。
- お問い合わせ



環境に配慮した植物油インキを使用しています